



PRODUKTINFORMATION:

K3Pro Compress (C-Line) Implantate

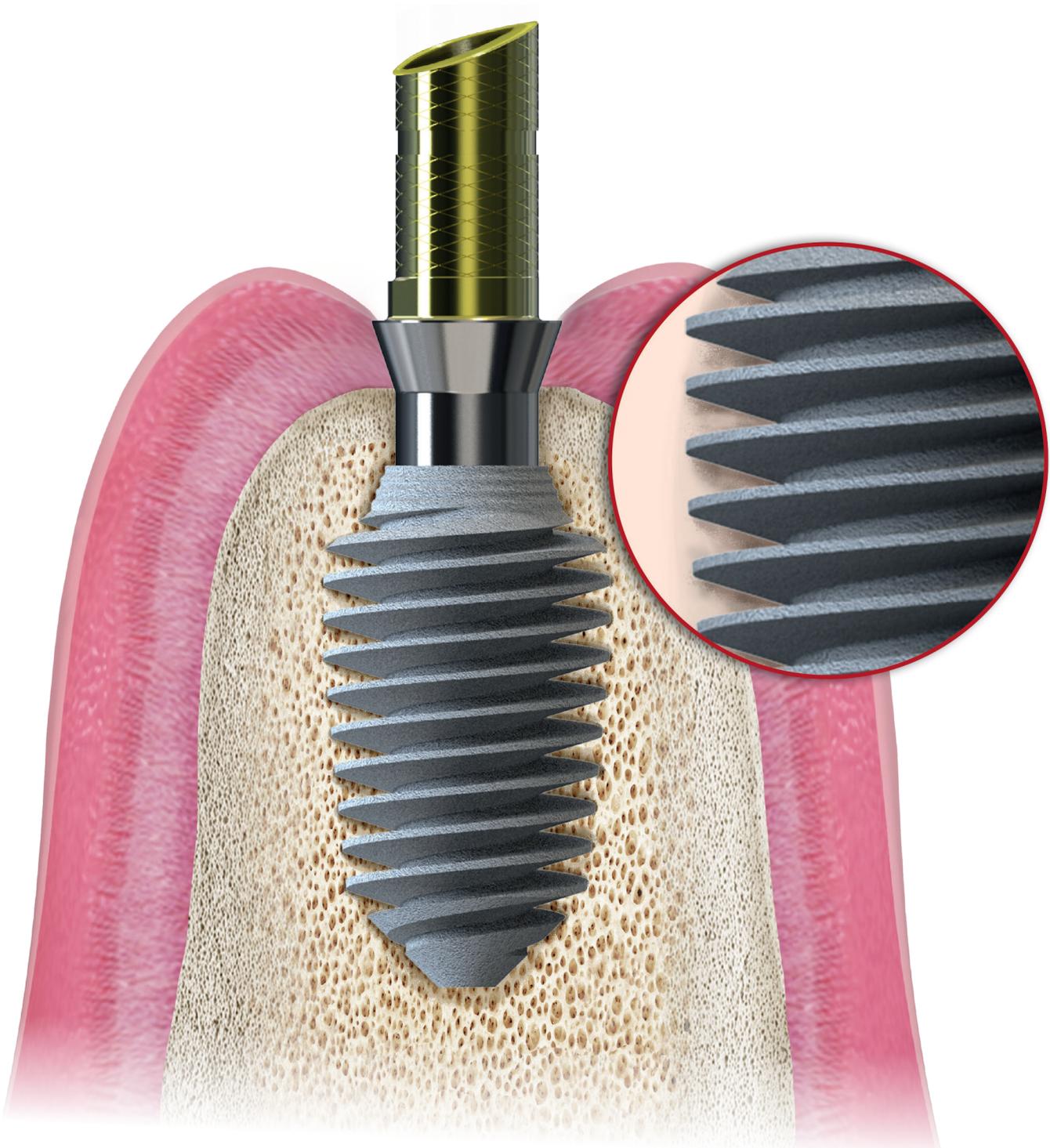

IMPLANTATE FÜR JEDE INDIKATION

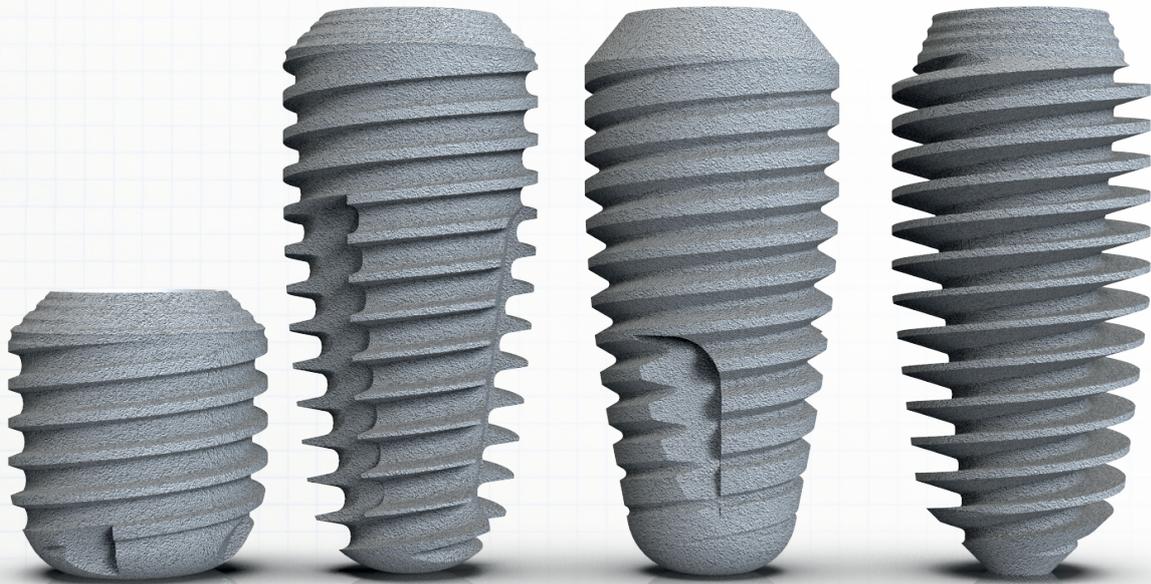

K3Pro Short
Implantat

K3Pro Rapid
Implantat
(R-Line)

K3Pro Sure
Implantat
(S-Line)

K3Pro Compress
Implantat
(C-Line)

PRODUKTINFORMATION


K3Pro Compress (C-Line) Implantate

Das Design der evolutionären Compress (C-Line) Implantate der Erfolgsserie K3Pro® zeichnet sich durch ein einzigartiges Plateau-Schneidgewinde aus, das insbesondere im weichen Knochen eine besonders zuverlässige hohe Primärstabilität gewährleistet. Der Implantatdurchmesser wird primär durch die Breite der Gewindeflanken definiert und nicht durch den Implantatkörper, dieser bleibt stets solide aber grazil. So bestimmen Knochenqualität und Grad der gewünschten Primärstabilität das auszuwählende Implantat. Die Unterschiede der Durchmesser des Compress (C-Line) Implantats liegen in der Dimension der Gewindeflanken und weniger am Körper.

Die Auslegung als progressives Schneidgewinde erleichtert nicht nur die kontrollierte Implantatinsertion in weichem Knochen, sondern auch im Rahmen der Sofortimplantation in Verbindung mit dem konischen und grazilen Implantatkörper die Fixierung an der Wand der Extraktionsalveole. Für die Einheilung durch Blutkoagulation bleibt besonders viel Freiraum. Das Plateau-Design der Gewindelamellen fördert die Knochenneubildung durch die Verteilung der neu entstehenden Druck- und Zugbelastung.


Sämtliche klassischen Vorteile des bewährten und innovativen K3Pro-Designs wie die schräge Schulter für subkrestale Insertion für herausragende Ästhetik und nachhaltigen Gewebeerhalt im Rahmen des Stable Tissue Concepts bleiben auch beim neuen Compress (C-Line) Implantat erhalten.

Die Abdeckschraube für die geschlossene biologische Einheilung nach dem Stable Tissue Concept wird indikationsspezifisch individuell gewählt und ist in unterschiedlichen Höhen erhältlich. Bitte bestellen Sie diese separat.

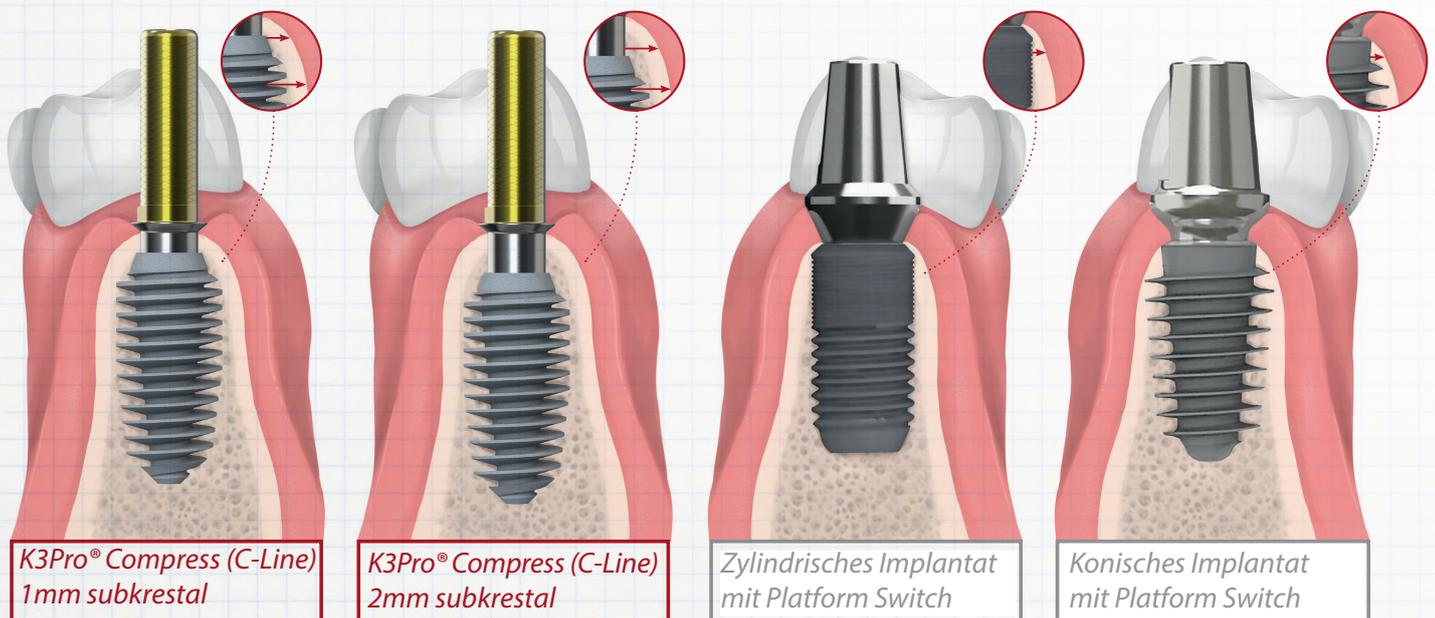

ZUSAMMENFASSUNG

Vorteile des K3Pro Compress (C-Line) Implantats

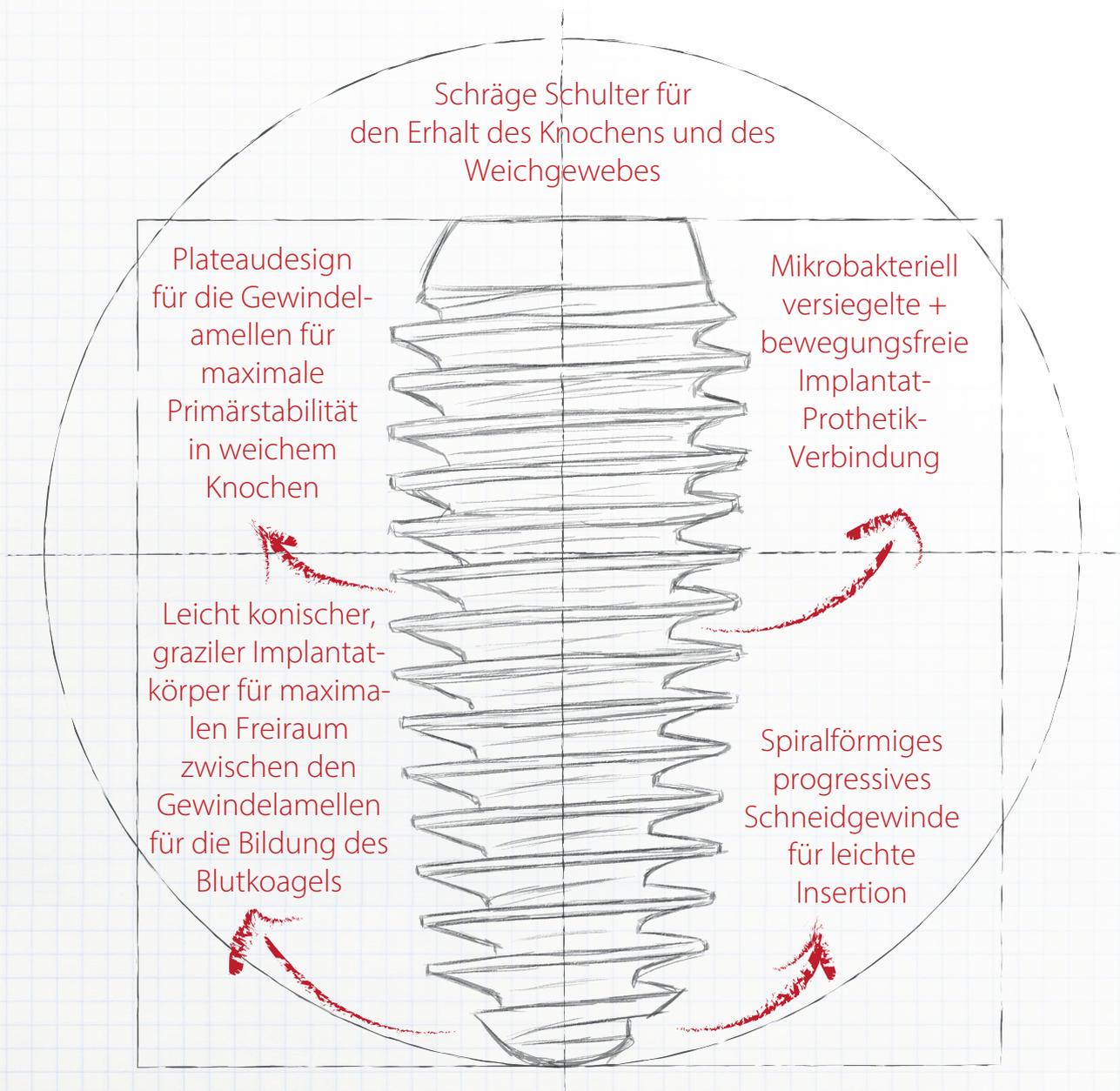

Implantatvolumen ermöglicht entsprechend der Knochenqualität die Verwendung durchmesserreduzierter Finalbohrer


WAHL DER BOHRER

Für K3Pro Compress (C-Line) Implantate

Die K3Pro Compress (C-Line) Implantate sind vollwertiges Mitglied der Argon-Produktfamilie und ohne Einschränkung kompatibel mit sämtlichen prothetischen Lösungen für die 3-Millimeter-Plattform (Gelb) von K3Pro®. Dies gilt auch für chirurgisches Zubehör (z.B. Gingivaformer) und Laborkomponenten (z.B. Abformpfosten und Modellanaloge). Bitte beziehen Sie dafür den Produktkatalog und lassen Sie sich über das Sortiment informieren.




Wir empfehlen die Verwendung der konischen Bohrer (KZB), da unser K3Pro Compress (C-Line) Implantat mit einem selbstschneidendem Gewinde ausgestattet ist.

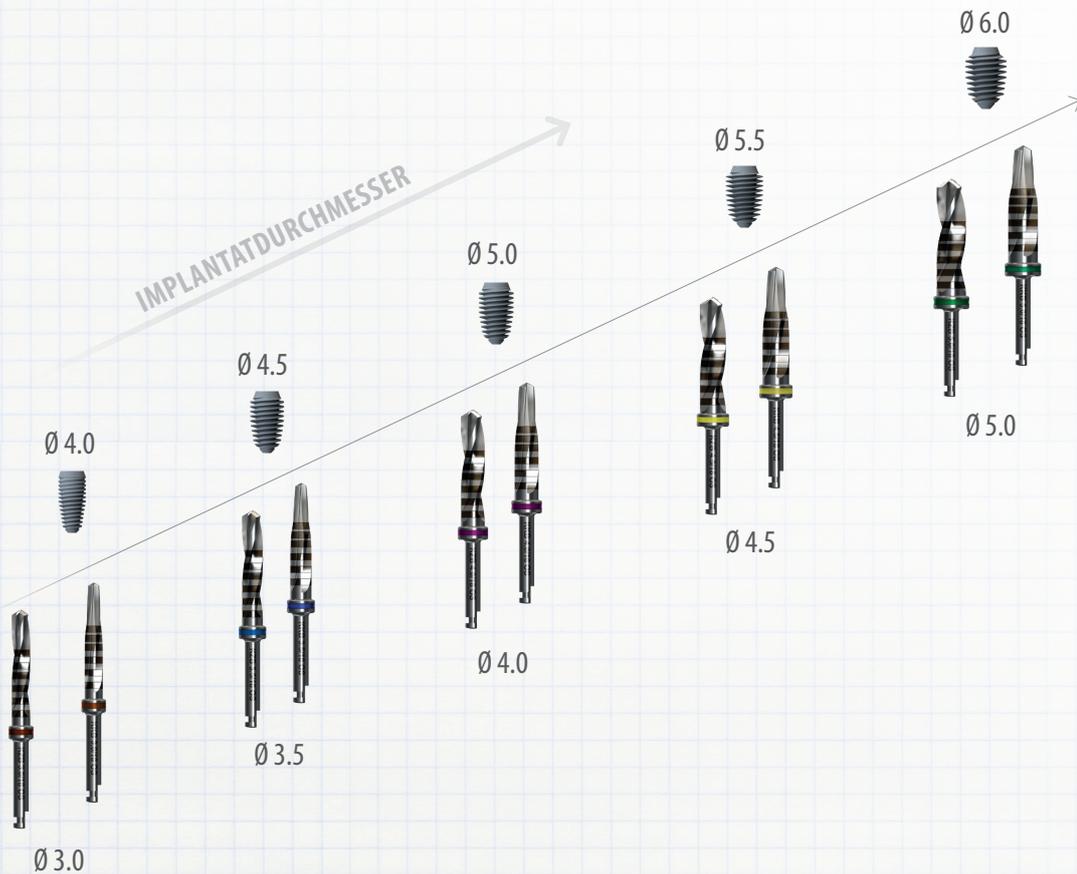


TECHNISCHE DATEN

Auswahl und Spezifikationen

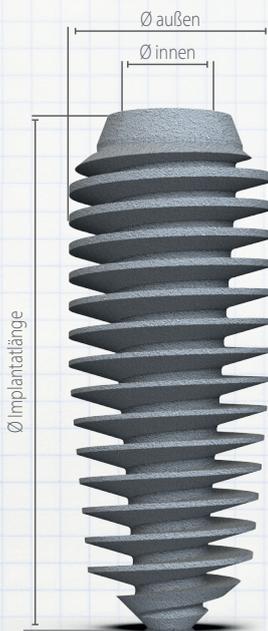

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Titan Grad 4
Oberfläche	Osteoactive®
Konus Grad	1.5° / 3° gesamt
Plattform	3 mm
Verbindungslänge	> 3 mm
Innenschraube	1.6 mm
Orientierung	Sechskant Fläche
Rotationssicherung	2.5 mm Sechskant

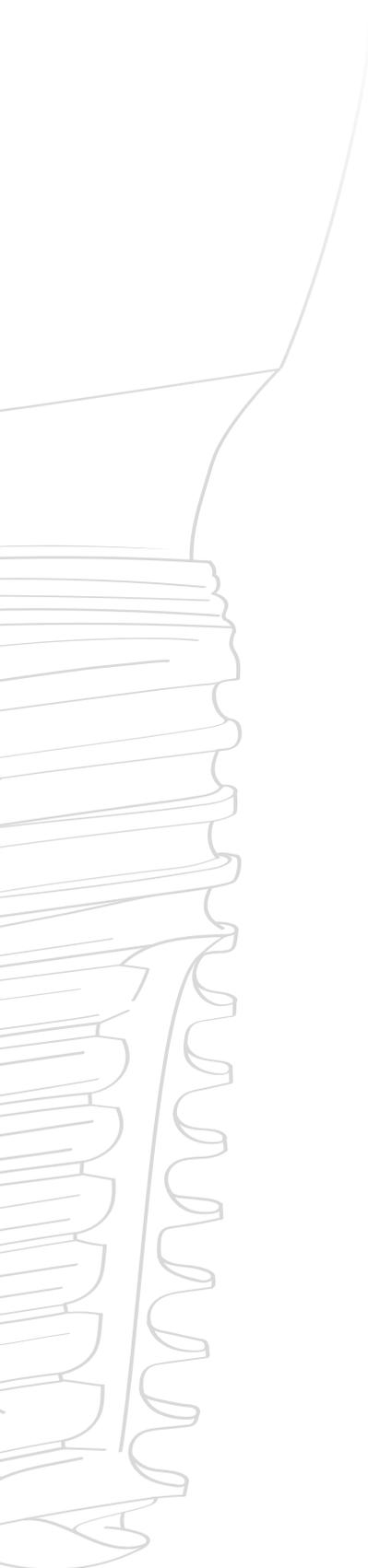

Argon Dental Vertriebs GmbH & Co. KG
Franz-Kirsten-Straße 1
DE-55411 Bingen am Rhein
Germany
+49 (0) 6721/ 30960
www.argon-dental.de
info@argon-dental.de