


PRODUKTINFORMATION:

K3Pro® Short Implantate

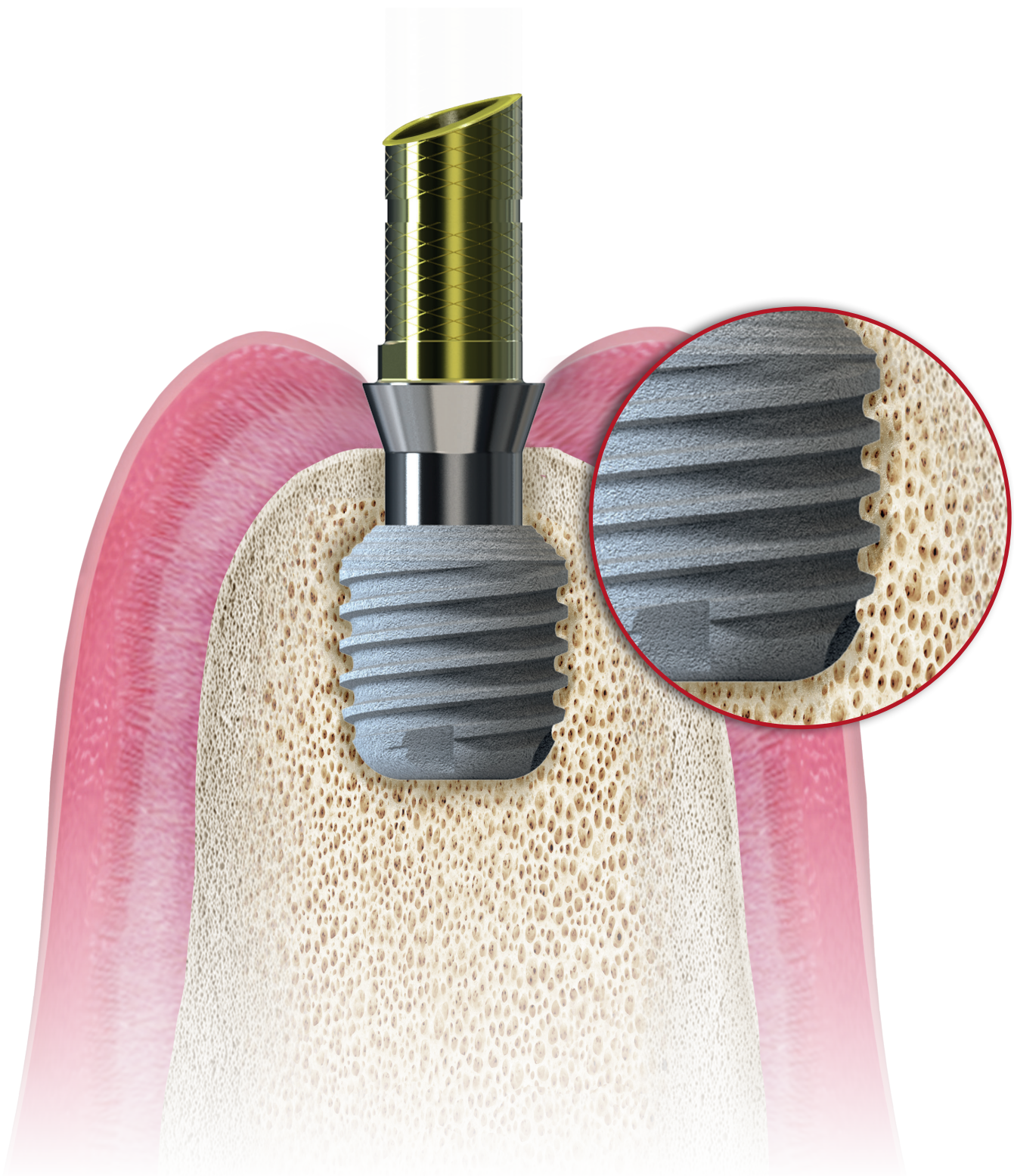


PRODUKTINFORMATION

K3Pro® Short Implantate


Das K3Pro® Short Implantat. Für schwierigste Indikationen bei stark reduziertem Knochenangebot bietet K3Pro mit der revolutionären, langen Konusverbindung mit 1,5°-Winkel, die generell nachhaltige Bakteriendichtigkeit und Mikrobewegungsfreiheit gewährleistet, große Vorteile: Nur so ist es möglich unter diesen Voraussetzungen nachhaltig klinisch und funktionell erfolgreich zu implantieren. Unsere Short-Implantate in den Längen 5,5 und 6,5 mm (bei Durchmessern von 4 bis 6 mm), die verblockt oder als Einzelzahnersatz verwendet werden können unterstützen wirkungsvoll dank der neu entstehenden Druck- und Zugbelastung den Wiederaufbau und langfristigen Erhalt des Knochens. Die zylindrische Außenform für eine maximierte Oberfläche und die apikale Abrundung mit Schneidnut optimieren den Einsatz des K3Pro® Short unter diesen schwierigen Bedingungen.

Das erforderliche Instrumentarium ist identisch mit den Sure Implantaten, so können unsere Anwender die Short Implantate ohne zusätzlichen Aufwand sicher setzen.

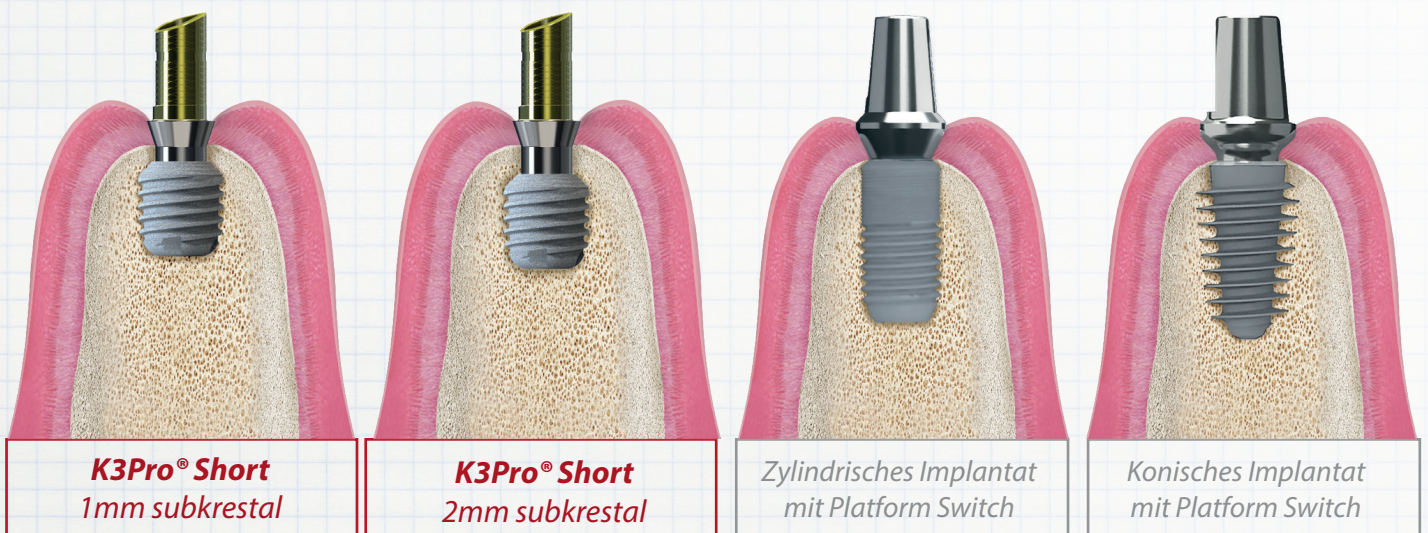



ZUSAMMENFASSUNG

Vorteile des Short Implantats

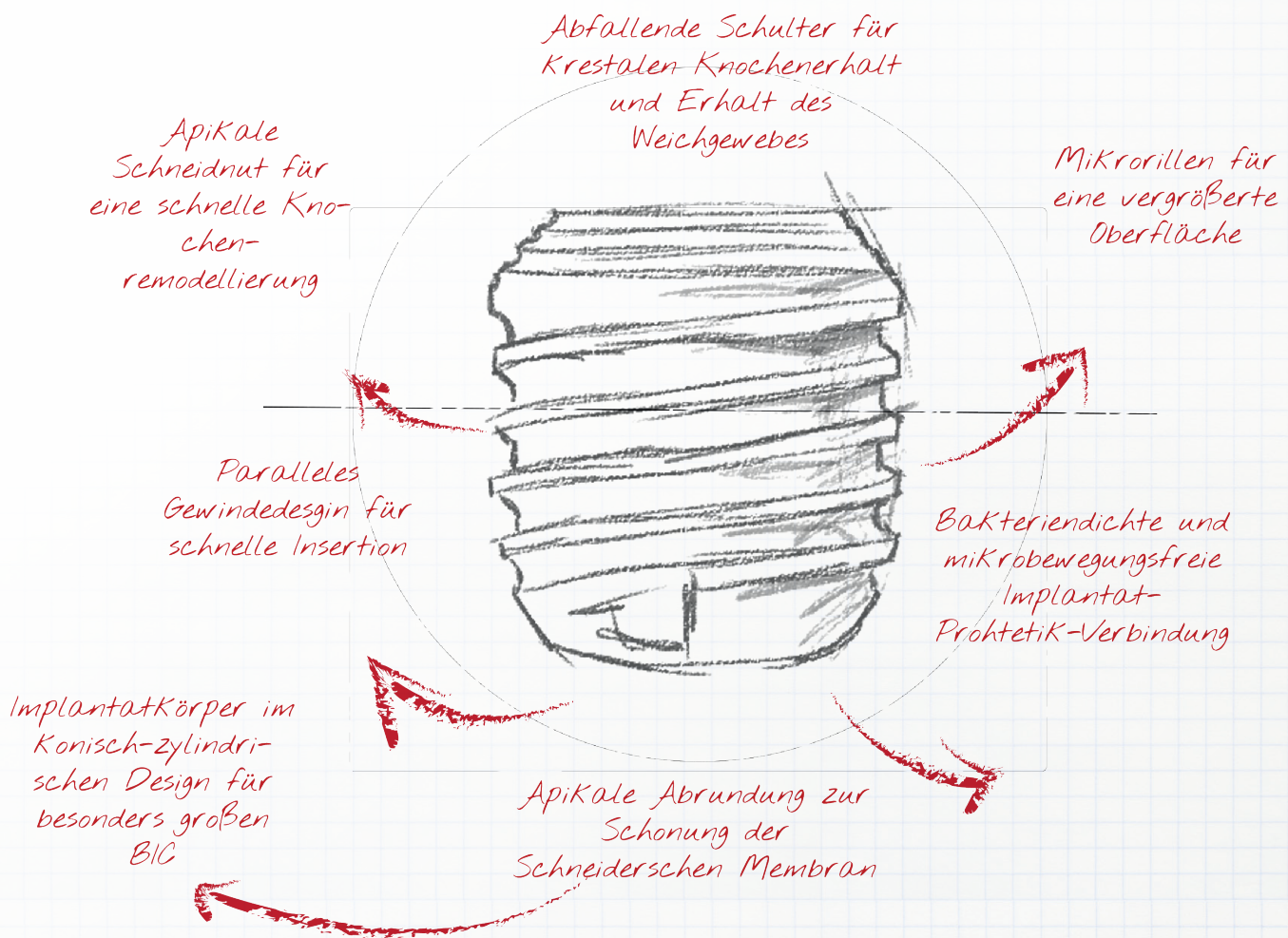


WAHL DER BOHRER

Für K3Pro® Short Implantate

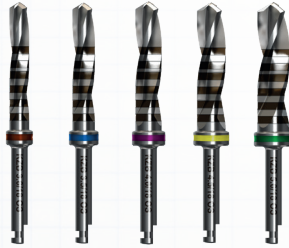
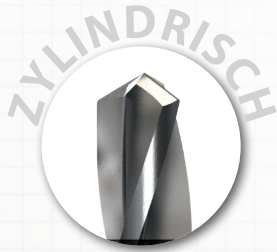


Da unsere K3Pro® Sure Implantate über kein selbstschneidendes Gewinde verfügen, empfehlen wir ausschließlich die zylindrischen Bohrer (KZB) zu verwenden.

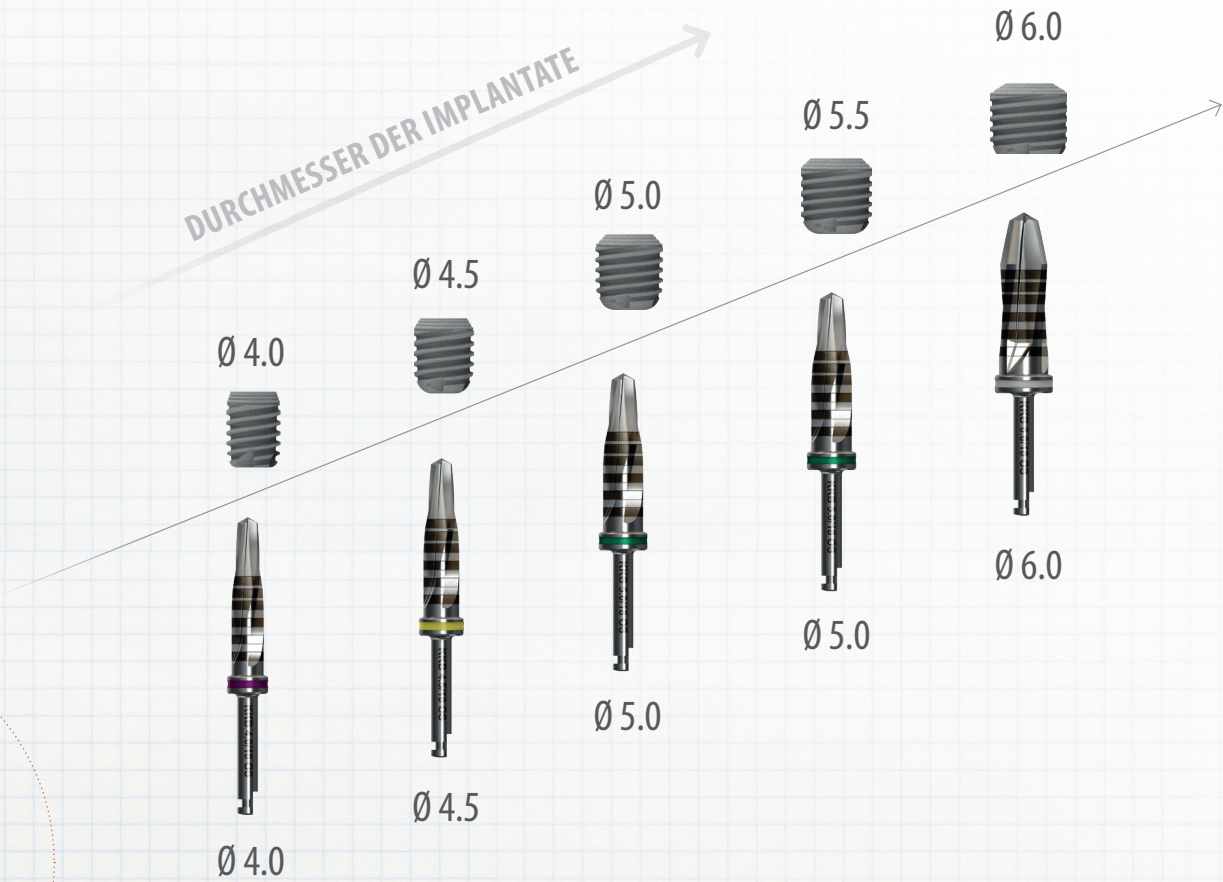


TECHNISCHE DATEN


Auswahl und Spezifikationen

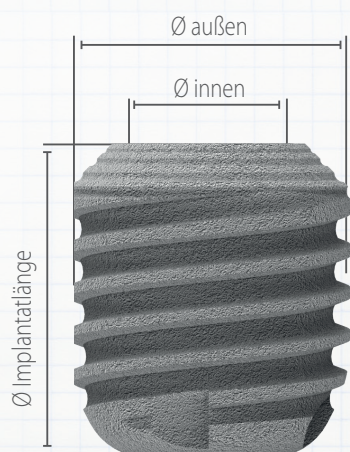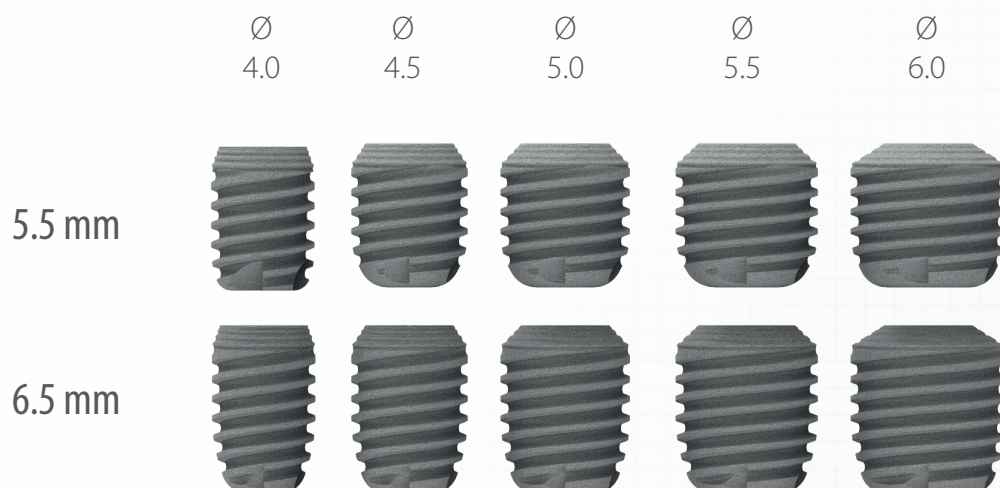

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Titan Grad 4
Oberfläche	Osteoactive®
Konus Grad	1.5° / 3° gesamt
Platform	3 mm
Verbindungslänge	> 3 mm
Innenschraube	1.6 mm
Orientierung	Sechskant Fläche
Rotationssicherung	2.5 mm Sechskant

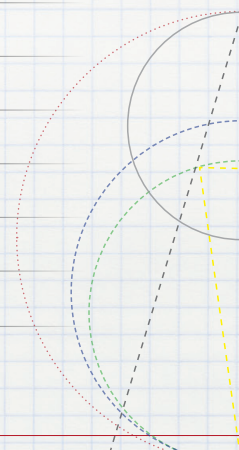

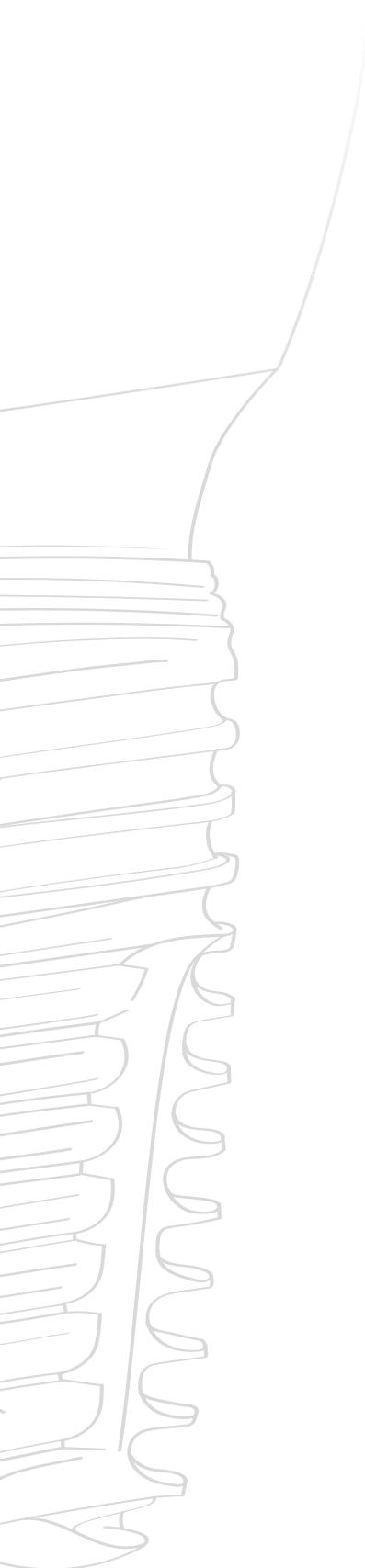

Argon Dental Vertriebs
GmbH & Co. KG
Franz-Kirsten-Straße 1
55411 Bingen am Rhein
Germany
+49 (0) 6721/ 30960
www.argon-dental.de
info@argon-dental.de